

# Le nouveau TENA Slip avec ConfioAir™ respirant Mode d'emploi rapide

## Quelques innovations ont été apportées aux produits TENA Slip.

Celles-ci incluent de nouvelles attaches réajustables larges afin de permettre une fixation parfaite et d'offrir plusieurs possibilités d'ajustement. Le nouveau TENA Slip se distingue légèrement du

produit précédent en ce qui concerne la technique de pose. Ce mode d'emploi rapide vous aidera à poser le nouveau TENA Slip de manière sûre.

## Mode d'emploi rapide : Fixation aisée des attaches

### Appuyer



Pressez l'attache réajustable sur le voile extérieur effet textile, puis lissez l'attache.

### Tirer




Tirez doucement sur les attaches réajustables pour les fixer dans le tissu du voile extérieur.



## Pose de TENA Slip – en position debout



Lorsque la personne est debout, positionnez la protection d'avant en arrière entre les jambes.

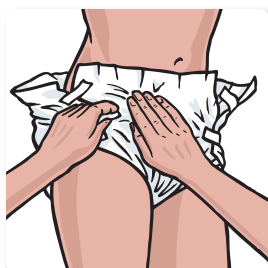

Fixez successivement les attaches réajustables inférieures, de manière à ce qu'elles soient légèrement orientées vers le haut.



Fixez maintenant les attaches réajustables supérieures, de manière à ce qu'elles soient légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort et l'ajustement. La protection permet de répéter la fixation et le réajustement des attaches.




Pressez doucement les attaches réajustables sur le voile extérieur effet textile, puis lissez-les.



Tirez doucement sur les attaches réajustables pour les fixer dans le tissu du voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

## Pose de TENA Slip – en position allongée

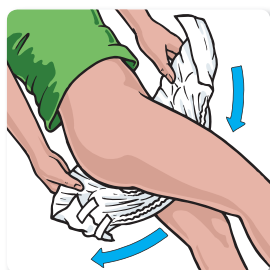

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez la protection d'avant en arrière entre les jambes.



Lissez la protection.



Fixez maintenant les attaches inférieures, de manière à ce qu'elles soient légèrement orientées vers le haut. Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière à ce qu'elles soient légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort et l'ajustement. La protection permet de répéter la fixation et le réajustement des attaches.



Pressez doucement les attaches réajustables sur le voile extérieur effet textile, puis lissez-les.



Tirez doucement sur les attaches réajustables, pour les fixer dans le tissu du voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

## Voici un aperçu des autres caractéristiques du produit :

- Le nouveau voile extérieur respirant et les côtés respirants non-tissés gardent la peau sèche et saine
- La nouvelle matière effet textile est douce et agréable contre la peau
- Les nouvelles attaches réajustables larges permettent de fixer la protection facilement et de la réajuster plusieurs fois
- Action rapide, le noyau très absorbant assure une protection fiable contre les fuites et les odeurs
- Testé dermatologiquement
- Empreinte carbone réduite de 4%
- 5% d'utilisation de sources d'énergie non renouvelables en moins

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter :

CH: service clients TENA au **0848 810 150**

0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.